

# WELCH ALLYN CARDIOPERFECT™ POCKET ECG

*De perfecte keuze*

## **Een krachtige ECG die in uw handpalm past**

Met de Welch Allyn CardioPerfect CER Pocket ECG, gebaseerd op het Windows CE (zak-pc) platform, kunt u ECG's maken met Welch Allyn-software op een zak-pc. Dit handige draagbare ECG-apparaat is ideaal voor gebruik onderweg of in diverse ziekenhuisafdelingen.

### Welch Allyn Pocket ECG

Het systeem bestaat uit de Welch Allyn CardioPerfect CER zak-ECG-software, de interface met de PC en één van de 2 Welch Allyn CardioPerfect ECG-recorders. Deze onderdelen vormen samen een klein ECG-apparaat waarmee u ECG's kunt maken, bekijken en opslaan.

Deze ECG's kunnen vervolgens worden verstuurd naar de Welch Allyn CardioPerfect™ Workstation-software voor verdere analyse, om ze op te slaan, te bekijken of af te drukken.

Het systeem is te koop als optie voor gebruikers van het standaard Welch Allyn CardioPerfect ECG-systeem of als afzonderlijk systeem voor nieuwe gebruikers.

Een bijkomend voordeel van de zak-pc is dat deze apparaatjes veel sneller opstarten dan de gangbare pc's.

Door zijn doorgedreven investeringen in hardware- en software-ontwikkeling is Welch Allyn uitgegroeid tot de belangrijkste leverancier van geavanceerde cardiopulmonale uitrusting, zowel vandaag als in de toekomst.



*Continue investeringen in hardware en software ontwikkelingen maken Welch Allyn de krachtigste cardiopulmonary systemen leverancier, voor nu en in de toekomst.*

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

# WELCH ALLYN CARDIOPERFECT™ POCKET ECG

*De perfecte keuze*


De software stelt 3 verschillende bedrijfsmodi ter beschikking:



De Monitor-modus wordt gebruikt om de kwaliteit van de geregistreerde signalen te beoordelen. In bepaalde gevallen kan deze stand worden gebruikt voor een langdurige bewaking. U kunt ook patiëntgegevens invoeren of instellingen wijzigen, voordat u de registratie in deze modus start.



In de Review-modus kunt u geregistreerde ECG's herbekijken en alle opgenomen segmenten doorlopen, metingen uitvoeren, patiëntgegevens en tekst invoeren of bewerken, gesproken commentaar beluisteren of toevoegen of instellingen wijzigen.

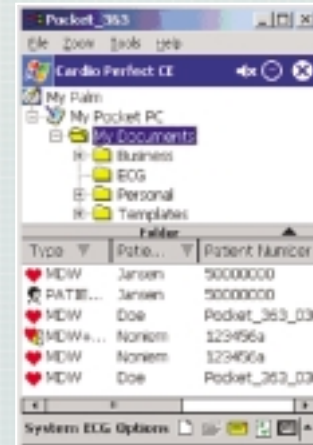

In de File list-modus kunt u alle opgenomen ECG-bestanden zien, een bestand selecteren en openen voor nazicht of het bestand verwijderen. Hier kunt u nieuwe bestanden aanmaken voor opname.

## Technische specificaties

- PRO-model (afzonderlijke patiëntkabel vereist)  
Afmetingen & gewicht: 147x108x32,5mm,  
312g (.7 lbs) inclusief batterijen  
Voeding: Oplaadbare batterij

## Bestelinformatie

- |               |  |
|---------------|--|
| CER-100       | PRO ECG-systeem voor zak-pc inclusief Welch Allyn CardioPerfect Workstation-software |
| RE-PC-EUR-BAN | PRO permanente patiëntkabel  |
| RE-PC-EUR-BAN | PRO permanente patiëntkabel  |

De software is ontwikkeld voor de Compaq ipaq, maar er zal ook rekening gehouden worden met andere zak-pc's die later op de markt komen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger.



PRO MODEL

Welch Allyn Cardio Control BV, Staalweg 50, 2612 KK, Delft  
Tel: +31.15.750.5000 Fax: +31.15.750.5050

[www.welchallyn.com/cardiocontrol](http://www.welchallyn.com/cardiocontrol)



**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

©2003 Welch Allyn, Inc. SM 2535-DU