



HEBU Neuheiten



HEBU News

HEBU  
Medical

## Sterilisations-Container System Sterilization Containers System



Die Abmessungen unserer Container entsprechen der DIN 58952 und garantieren daher ein Maximum an Benutzerfreundlichkeit. HEBU-Container sind aus einer speziellen, eloxierten Aluminiumlegierung hergestellt. Sie gewährleisten, bedingt durch ihre hohe thermische Leitfähigkeit, eine optimale Trocknungsphase. Alle HEBU-Container sind stapelbar, wodurch Platz und Lagerprobleme kein Thema mehr sind. Alle Deckel können in 6 verschiedenen Farben geliefert werden.

*The measurements of our containers are according to and meet the respective DIN 58952 standards and therefore guarantee maximum user friendliness.*

*HEBU-containers are manufactured of a special, anodized aluminium alloy. They guarantee, due to their high thermal conductivity, an optimal drying phase.*

*All HEBU-containers can be stacked, whereby space and storage problems are solved.*

*All lids can be supplied in 6 different colors.*

# Sterilisations-Container System

## Sterilization Containers System



HEBU-Container verfügen über mehrere Möglichkeiten der Kennzeichnung. Durch einfaches Einschieben von Etiketten in die dafür vorgesehenen, mit einer Feder-sicherung ausgestatteten Schlitze, kann jeder Container individuell beschriftet werden.

Um den Container vor unberechtigtem Öffnen zu schützen kann ein Sicherheits-sigel am Öffnungsgriff angebracht werden das automatisch zerbricht sobald der Container geöffnet wird.

*HEBU-containers have the possibility to be marked in several ways. By simple insertion of the labels in a specified slot, which is equipped with a safety spring, each container can be individually marked.*

*To prevent the container from unauthorized opening, a safety seal can be fixed on the opening handle which breaks as soon as the container is opened.*



Im Deckelrand ist rundum eine Silikondichtung eingelassen, sie garantiert eine absolute Dichtigkeit während und nach dem Sterilisationsprozess.







Die Filterhalterung mit integrierter Silikondichtung sorgt für einen festen und sicheren Sitz des Filters (keimdicht). Der Sicherheitsverschluss der Filterhalterung ermöglicht einen schnellen und komfortablen Filterwechsel (hörbares einrasten).

*A silicon seal in the rim of the lid guarantees complete leakproof closure during and after sterilization.*







*The filter holder, with an integrated silicon seal, ensures solid and firm positioning of the filter (germ sealed). The safety catch of the filter holder allows the filter to be quickly and easily changed (you can hear it click into place).*

# 1/1 Containers



L (mm)	B (mm)	H (mm)	Deckelfarbe / Lid Color					
								
580	280	100	HE 1110-10	HE 1111-10	HE 1112-10	HE 1113-10	HE 1114-10	HE 1115-10
580	280	135	HE 1110-13	HE 1111-13	HE 1112-13	HE 1113-13	HE 1114-13	HE 1115-13
580	280	150	HE 1110-15	HE 1111-15	HE 1112-15	HE 1113-15	HE 1114-15	HE 1115-15
580	280	200	HE 1110-20	HE 1111-20	HE 1112-20	HE 1113-20	HE 1114-20	HE 1115-20
580	280	260	HE 1110-26	HE 1111-26	HE 1112-26	HE 1113-26	HE 1114-26	HE 1115-26

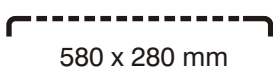


L (mm)	B (mm)	H (mm)	Deckelfarbe / Lid Color					
								
580	280	100	HE 1210-10	HE 1211-10	HE 1212-10	HE 1213-10	HE 1214-10	HE 1215-10
580	280	135	HE 1210-13	HE 1211-13	HE 1212-13	HE 1213-13	HE 1214-13	HE 1215-13
580	280	150	HE 1210-15	HE 1211-15	HE 1212-15	HE 1213-15	HE 1214-15	HE 1215-15
580	280	200	HE 1210-20	HE 1211-20	HE 1212-20	HE 1213-20	HE 1214-20	HE 1215-20
580	280	260	HE 1210-26	HE 1211-26	HE 1212-26	HE 1213-26	HE 1214-26	HE 1215-26




L (mm)	B (mm)	H (mm)	
580	280	100	HE 3110-10
580	280	135	HE 3110-13
580	280	150	HE 3110-15
580	280	200	HE 3110-20
580	280	260	HE 3110-26


L (mm)	B (mm)	H (mm)	
580	280	100	HE 3210-10
580	280	135	HE 3210-13
580	280	150	HE 3210-15
580	280	200	HE 3210-20
580	280	260	HE 3210-26



					
HE 3310-00	HE 3311-00	HE 3312-00	HE 3313-00	HE 3314-00	HE 3315-00

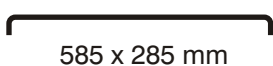Zusätzlicher Schutzdeckel / additional safety lid



					
HE 3410-00	HE 3411-00	HE 3412-00	HE 3413-00	HE 3414-00	HE 3415-00

Siebkorb mit Fallgriff, stapelbar  
Sieve basket with a drop-down handle, stackable




L (mm)	B (mm)	H (mm)	
480	250	50	HE 2110-50
480	250	70	HE 2110-70
480	250	100	HE 2110-10
480	254	50	HE 2111-50
485	255	30	HE 2112-30
485	255	50	HE 2112-50
485	255	70	HE 2112-70
485	255	100	HE 2112-10
510	254	50	HE 2113-50
540	252	60	HE 2114-60
540	255	30	HE 2115-30
540	255	50	HE 2115-80
540	255	70	HE 2115-70
540	255	100	HE 2115-10

Siebkorb mit Klappgriff, stapelbar  
Sieve basket with folding handle, stackable



L (mm)	B (mm)	H (mm)	
480	250	50	HE 2210-50
480	254	50	HE 2211-50
510	254	50	HE 2212-50

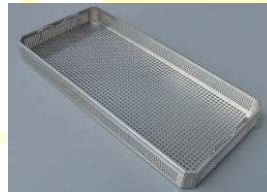Siebkorb aus Edelstahlblech mit Fallgriff, stapelbar  
Stainless steel sieve basket with drop-down handle, stackable



L (mm)	B (mm)	H (mm)	
485	253	30	HE 2410-30
485	253	50	HE 2410-50
485	253	70	HE 2410-70
485	253	100	HE 2410-10
540	253	30	HE 2411-30
540	253	50	HE 2411-50
540	253	70	HE 2411-70
540	253	100	HE 2411-10

Siebkorb mit Lochblechwandung und Fallgriff, stapelbar  
Sieve basket with perforated plate walls and a drop-down handle, stackable




L (mm)	B (mm)	H (mm)	
480	250	60	HE 2310-60




Deckel mit Verschluss zu Siebkorb aus Edelstahl  
Lid with lock for stainless steel sieve basket

L (mm)	B (mm)	
485	253	HE 2410-00
540	253	HE 2411-00

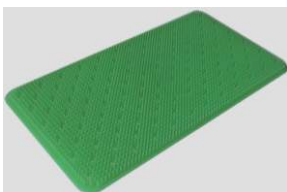

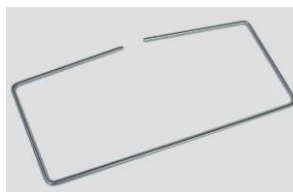Silikon Matte, *Silicon Mat*  
445 x 235 mm HE 3010-00









Tuchhalter, *Drape Retainer*  
545 x 255 mm HE 3011-00









Tuch, *Drape*  
130 x 60 cm HE 3012-60  
140 x 100 cm HE 3012-10  
185 x 45 cm HE 3013-45  
185 x 60 cm HE 3013-60

# 3/4 Containers



L (mm)	B (mm)	H (mm)	Deckelfarbe / Lid Color					
								
465	280	100	HE 1120-10	HE 1121-10	HE 1122-10	HE 1123-10	HE 1124-10	HE 1125-10
465	280	135	HE 1120-13	HE 1121-13	HE 1122-13	HE 1123-13	HE 1124-13	HE 1125-13
465	280	150	HE 1120-15	HE 1121-15	HE 1122-15	HE 1123-15	HE 1124-15	HE 1125-15



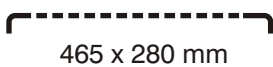
L (mm)	B (mm)	H (mm)	Deckelfarbe / Lid Color					
								
465	280	100	HE 1220-10	HE 1221-10	HE 1222-10	HE 1223-10	HE 1224-10	HE 1225-10
465	280	135	HE 1220-13	HE 1221-13	HE 1222-13	HE 1223-13	HE 1224-13	HE 1225-13
465	280	150	HE 1220-15	HE 1221-15	HE 1222-15	HE 1223-15	HE 1224-15	HE 1225-15



L (mm)	B (mm)	H (mm)	
465	280	100	HE 3120-10
465	280	135	HE 3120-13
465	280	150	HE 3120-15




L (mm)	B (mm)	H (mm)	
465	280	100	HE 3220-10
465	280	135	HE 3220-13
465	280	150	HE 3220-15



					
HE 3320-00	HE 3321-00	HE 3322-00	HE 3323-00	HE 3324-00	HE 3325-00

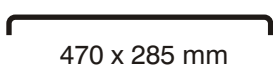Zusätzlicher Schutzdeckel / additional safety lid



					
HE 3420-00	HE 3421-00	HE 3422-00	HE 3423-00	HE 3424-00	HE 3425-00

Siebkorb mit Fallgriff, stapelbar  
*Sieve basket with a drop-down handle, stackable*




L (mm)	B (mm)	H (mm)	
405	255	30	HE 2120-30
405	255	50	HE 2120-50
405	255	70	HE 2120-70
405	255	100	HE 2120-10

Siebkorb aus Edelstahlblech mit Fallgriff, stapelbar  
*Stainless steel sieve basket with drop-down handle, stackable*




L (mm)	B (mm)	H (mm)	
405	253	30	HE 2420-30
405	253	50	HE 2420-50
405	253	70	HE 2420-70
405	253	100	HE 2420-10

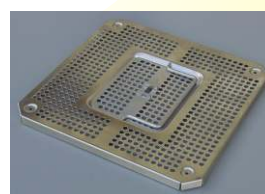

Deckel mit Verschluss zu Siebkorb aus Edelstahl  
*Lid with lock for stainless steel sieve basket*

L (mm)	B (mm)	
405	253	HE 2420-00

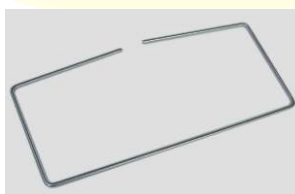







Tuchhalter, *Drape Retainer*  
405 x 255 mm HE 3020-00









Tuch, *Drape*  
140 x 100 cm HE 3021-00


# 1/2 Containers




L (mm)	B (mm)	H (mm)	Deckelfarbe / Lid Color					
								
285	280	100	HE 1130-10	HE 1131-10	HE 1132-10	HE 1133-10	HE 1134-10	HE 1135-10
285	280	135	HE 1130-13	HE 1131-13	HE 1132-13	HE 1133-13	HE 1134-13	HE 1135-13
285	280	150	HE 1130-15	HE 1131-15	HE 1132-15	HE 1133-15	HE 1134-15	HE 1135-15
285	280	200	HE 1130-20	HE 1131-20	HE 1132-20	HE 1133-20	HE 1134-20	HE 1135-20
285	280	260	HE 1130-26	HE 1131-26	HE 1132-26	HE 1133-26	HE 1134-26	HE 1135-26



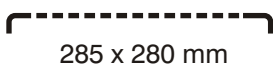
L (mm)	B (mm)	H (mm)	Deckelfarbe / Lid Color					
								
285	280	100	HE 1230-10	HE 1231-10	HE 1232-10	HE 1233-10	HE 1234-10	HE 1235-10
285	280	135	HE 1230-13	HE 1231-13	HE 1232-13	HE 1233-13	HE 1234-13	HE 1235-13
285	280	150	HE 1230-15	HE 1231-15	HE 1232-15	HE 1233-15	HE 1234-15	HE 1235-15
285	280	200	HE 1230-20	HE 1231-20	HE 1232-20	HE 1233-20	HE 1234-20	HE 1235-20
285	280	260	HE 1230-26	HE 1231-26	HE 1232-26	HE 1233-26	HE 1234-26	HE 1235-26



L (mm)	B (mm)	H (mm)	
285	280	100	HE 3130-10
285	280	135	HE 3130-13
285	280	150	HE 3130-15
285	280	200	HE 3130-20
285	280	260	HE 3130-26






L (mm)	B (mm)	H (mm)	
285	280	100	HE 3230-10
285	280	135	HE 3230-13
285	280	150	HE 3230-15
285	280	200	HE 3230-20
285	280	260	HE 3230-26



					
HE 3330-00	HE 3331-00	HE 3332-00	HE 3333-00	HE 3334-00	HE 3335-00

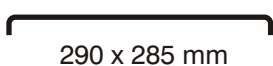Zusätzlicher Schutzdeckel / additional safety lid



					
HE 3430-00	HE 3431-00	HE 3432-00	HE 3433-00	HE 3434-00	HE 3435-00



Siebkorb mit Fallgriff, stapelbar  
*Sieve basket with a drop-down handle, stackable*



L (mm)	B (mm)	H (mm)	
240	250	50	HE 2130-50
240	250	70	HE 2130-70
240	254	50	HE 2131-50
255	245	30	HE 2132-30
255	245	50	HE 2133-50
255	245	70	HE 2133-70
255	245	100	HE 2133-10

Siebkorb mit Klappgriff, stapelbar  
*Sieve basket with folding handle, stackable*



L (mm)	B (mm)	H (mm)	
240	250	50	HE 2230-50
240	254	50	HE 2231-50

Siebkorb aus Edelstahlblech mit Fallgriff, stapelbar  
*Stainless steel sieve basket with drop-down handle, stackable*




L (mm)	B (mm)	H (mm)	
243	253	30	HE 2430-30
243	253	50	HE 2430-50
243	253	70	HE 2430-70
243	253	100	HE 2430-10

Siebkorb mit Lochblechwandung und Fallgriff, stapelbar  
*Sieve basket with perforated plate walls and a drop-down handle, stackable*




L (mm)	B (mm)	H (mm)	
240	250	60	HE 2330-60

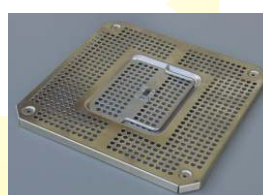

Deckel mit Verschluss zu Siebkorb aus Edelstahl  
*Lid with lock for stainless steel sieve basket*

L (mm)	B (mm)	
243	253	HE 2430-00

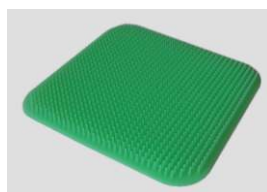

Silikon Matte, *Silicon Mat*  
245 x 245 mm HE 3030-00

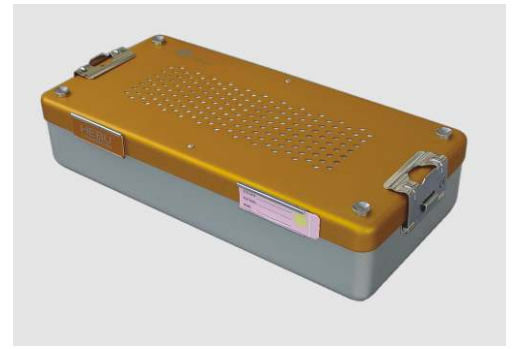







Tuchhalter, *Drape Retainer*  
255 x 255 mm HE 3031-00








Tuch, *Drape*  
90 x 60 cm HE 3032-60  
90 x 80 cm HE 3032-80  
130 x 45 cm HE 3033-45  
130 x 60 cm HE 3033-60

# Mini Containers



L (mm)	B (mm)	H (mm)	Deckelfarbe / Lid Color				
							
300	140	40	HE 1140-40	HE 1141-40	HE 1142-40	HE 1143-40	HE 1144-40
300	140	70	HE 1140-70	HE 1141-70	HE 1142-70	HE 1143-70	HE 1144-70
300	140	100	HE 1140-100	HE 1141-100	HE 1142-100	HE 1143-100	HE 1144-100



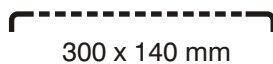
L (mm)	B (mm)	H (mm)	Deckelfarbe / Lid Color				
							
300	140	40	HE 1240-40	HE 1241-40	HE 1242-40	HE 1243-40	HE 1244-40
300	140	70	HE 1240-70	HE 1241-70	HE 1242-70	HE 1243-70	HE 1244-70
300	140	100	HE 1240-100	HE 1241-100	HE 1242-100	HE 1243-100	HE 1244-100



L (mm)	B (mm)	H (mm)	
300	140	40	HE 3140-40
300	140	70	HE 3140-70
300	140	100	HE 3140-100




L (mm)	B (mm)	H (mm)	
300	140	40	HE 3240-40
300	140	70	HE 3240-70
300	140	100	HE 3240-100



				
HE 3340-00	HE 3341-00	HE 3342-00	HE 3343-00	HE 3344-00

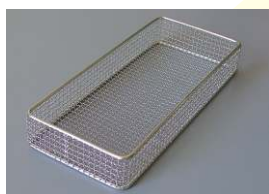Siebkorb ohne Griff, stapelbar  
*Sieve basket without handle, stackable*




L (mm)	B (mm)	H (mm)	
265	120	40	HE 2140-40

Siebkorb aus Edelstahlblech  
mit Fallgriff, stapelbar  
*Stainless steel sieve basket with  
drop-down handle, stackable*




L (mm)	B (mm)	H (mm)	
265	120	50	HE 2440-50

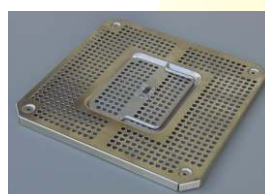
Deckel mit Verschluss  
zu Siebkorb aus Edelstahl  
*Lid with lock for stainless steel  
sieve basket*



L (mm)	B (mm)	
265	120	HE 2440-00

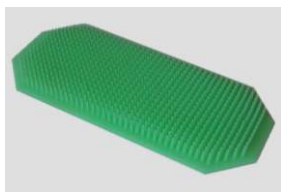

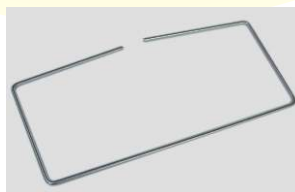Silikon Matte, *Silicon Mat*  
270 x 125 mm HE 3040-00



Tuchhalter, *Drape Retainer*  
280 x 125 mm HE 3041-00




Tuch, *Drape*  
60 x 40 cm HE 3042-00

HEBU  
medical

# Zubehör Accessories



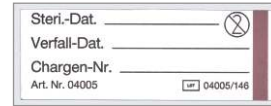
HE 3010-03  
 100 Stück/Packung  
**Papieretikett** mit Indikator  
 für 1/1, 3/4 und 1/2 Container  
 100 Pcs/Package  
**Paper label with indikator**  
 for 1/1, 3/4 and 1/2 Containers




HE 3040-03  
 100 Stück/Packung  
**Papieretikett** mit Indikator  
 für Minicontainer  
 100 Pcs/Package  
**Paper label with indikator**  
 for Mini Containers



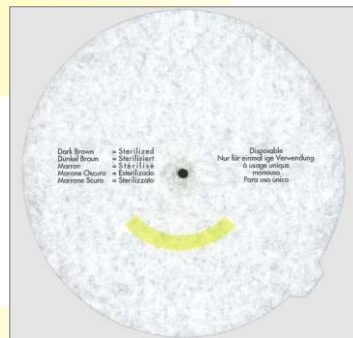
HE 3010-05  
**Aluminiumetikett**  
 für 1/1, 3/4, 1/2 und Mini-Container  
 Farben und Beschriftung auf Anfrage  
**Aluminum label**  
 for 1/1, 3/4, 1/2 and Mini Containers  
 color and sign on inquiry



HE 3010-01  
**Papierfilter**, 100 Stück/Packung  
 für 1/1, 3/4 und 1/2 Container  
**Paper filters**, 100 Pcs/Package  
 for 1/1, 3/4 and 1/2 Containers

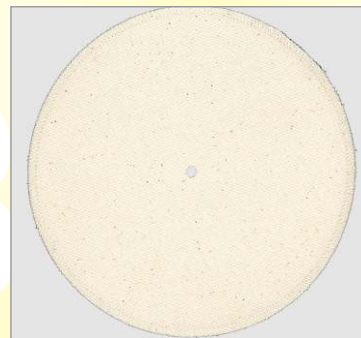

HE 3010-02  
**Textilfilter**, einzeln  
 für 1/1, 3/4 und 1/2 Container  
**Textile filter**, single  
 for 1/1, 3/4 and 1/2 Containers

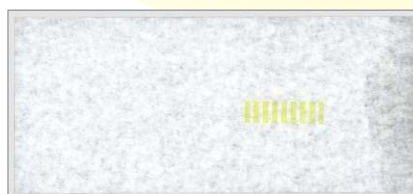


HE 3040-01  
**Papierfilter**  
 100 Stück/Packung für Minicontainer  
**Paper filters**  
 100 Pcs/Package for Mini Containers



HE 3040-02  
**Textilfilter**, einzeln  
 für Minicontainer  
**Textile filter**, single  
 for Mini Containers



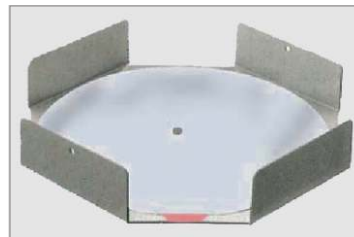
HE 3011-01  
Filterhalter für Papierfilter,  
*Storage box for Paper filter*  
HE 3011-02  
Filterhalter für Textilfilter,  
*Storage box for Textile filter*



HE 3012-01  
Aufbewahrungsbox für Papierfilter  
*Dispenser for Paper filter*



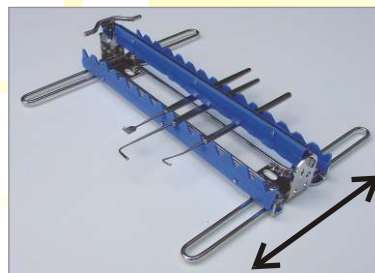120 x 70 x 40 mm HE 3900-01  
200 x 70 x 40 mm HE 3900-02  
235 x 70 x 40 mm HE 3900-03  
Klemmvorrichtung mit variabel einstell-  
barer Klemmhöhe 120 x 70 x 40 mm  
*Clamp with individual clamp height  
settings, 120 x 70 x 40 mm*



HE 3901-01  
Klemmvorrichtung mit stufenlos verstellbarer  
Klemmlänge von 60 - 214 mm  
*Clamp with individually adjustable  
clamp lengths from 60-214 mm*



HE 3000-00  
100 Stück/Packung  
Kunststoff Sicherheitsplombe  
*100 Pcs/Package  
Plastic Security Seal*



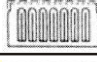

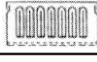


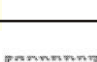
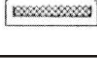
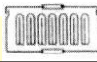

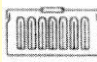
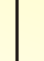




HE 3000-01  
Schildhalter für Siebkörbe  
*Shield holder for sieve baskets*

**Hinweise zur Sterilisation:**

Aus der nachfolgenden Tabelle können sie die jeweilige Eignung unserer Sterilisations-Container für die verschiedene Dampfsterilisationsverfahren nach DIN 58953/9 entnehmen:

Unsere Container und Filter bieten keinen Schutz gegen Verseuchung durch Flüssigkeiten, Staub oder andere mechanische Einflüsse.

Sterilisierbehälter	Art der Verpackung		Dampfsterilisationsverfahren nach DIN 58946 Teil 1				
	Beschreibung	Symbolische Darstellung und Packlage	Gravitationsverfahren	Vor-Vacuumverfahren	Fraktioniertes Vacuumverfahren	Fraktioniertes Strömungsverfahren	Dampfinjektionsverfahren
mit Filter (StB-F)	Textilien in Sterilisierbehälter mit Filter in Deckel und Boden nach DIN 58952 Teil 1		+	+	+	+	+
			○	○	+	+	+
	Textilien in Sterilisierbehälter mit Filter im Deckel, Boden nicht perforiert nach DIN 58952 Teil 1		-	-	+	+	+
			-	-	+	+	○
	Textilien in Sterilisierbehälter mit Filter im Boden, Deckel nicht perforiert nach DIN 58952 Teil 1		○	+	+	+	+
			-	○	+	+	+
	Instrumente auf Sterilisiersieb- schale nach DIN 58952 Teil 3 in Sterilisierbehälter mit Filter in Deckel und Boden nach DIN 58952 Teil 1		+	+	+	+	+
	Instrumente auf Sterilisiersieb- schale nach DIN 58952 Teil 3 in Sterilisierbehälter mit Filter im Deckel, Boden nicht perforiert nach DIN 58952 Teil 1		-	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>
	Instrumente auf Sterilisiersieb- schale nach DIN 58952 Teil 3 in Sterilisierbehälter mit Filter im Boden nach DIN 58952 Teil 1		○	+	+	+	+
	mit Ventilen (StB-V)	Textilien in Sterilisierbehälter mit Ventilen in Deckel und Boden nach DIN 58952 Teil 1		-	○	+	+
			-	-	+	+	○
Textilien in Sterilisierbehälter mit Ventil im Deckel, kein Ventil am Boden			-	-	+	+	-
			-	-	+	+	-
Instrumente auf Sterilisiersieb- schale in Sterilisierbehälter mit Ventil in Deckel und Boden			-	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>
Instrumente auf Sterilisiersieb- schale in Sterilisierbehälter mit Ventil im Deckel, Boden nicht perforiert			-	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>

Zeichenerklärung:    + anwendbar    - nicht anwendbar    ○ bedingt anwendbar

1) Um Beladungs- und/oder Anwendungsfehler zu vermeiden werden in Tabelle 1 Hinweise für die richtige oder falsche Kombination von Sterilisierbehältern mit genormten Dampfsterilisationsverfahren gegeben.




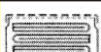

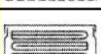



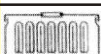





2) Geeignet sind nur solche Sterilisierbehälter bei denen die Verdampfung oder Ableitung des Kondensats sichergestellt ist.

3) Beim Gravitationsverfahren ohne Trocknungseinrichtung ist eine ausreichende Nachtrocknung nicht gegeben.

**Sterilization Information:**

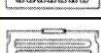You can chose the respective and suitable container for the various steam sterilization procedures from the following table according to DIN 58953/9:

Our containers do not protect against eventual contamination due to liquids, dust or other mechanical influences.

Sterilization container	Packing		Steam sterilization procedure acc. to DIN 58946, part I				
	Description	Symbolic representation and packing system	Gravitation procedure	Pre-vacuum procedures	Fractional vacuum procedure	Fractional flow procedure	Steam injection procedure
with filters ( StB-F )	Textiles in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I		+	+	+	+	+
			○	○	+	+	+
	Textiles in sterilization container with filter in lid, bottom not perforated acc. to DIN 58952 part I		-	-	+	+	+
			-	-	+	+	○
	Textiles in sterilization container with filter in bottom, lid not perforated acc. to DIN 58952 part I		○	+	+	+	+
			-	○	+	+	+
	Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I		+ <sup>3)</sup>	+	+	+	+
	Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in lid, bottom not perforated acc. to DIN 58952 part I		-	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>
	Instruments in wire basket acc. to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in bottom acc. to DIN 58952 part I		○	+	+	+	+
	with valves ( StB-V )	Textiles in sterilization container with valves in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I		-	○	+	+
			-	-	+	+	○
Textiles in sterilization container with valves in lid no valves on the bottom			-	-	+	+	-
			-	-	+	+	-
Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and bottom			-	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>
Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and bottom not perforated			-	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>	+ <sup>2)</sup>
Explanation of symbols:    + applicable    - not applicable    ○ limited application							
<sup>1)</sup> In order to avoid mistakes with regards to service, operation and/or when loading the sterilizer, please refer to table 1 for correct or wrong combination of sterilization containers for standardized steam sterilization procedures. <sup>2)</sup> Suitable are only sterilization containers guaranteeing evaporation or discharge of condensate. <sup>3)</sup> Gravitation procedures having no drying device do not guarantee a sufficient after-drying effect.							



Unser umfangreiches Sortiment umfasst über  
8000 verschiedene Instrumente.  
Sie finden es im Internet.  
Oder fordern Sie unseren Katalog an.

*Our extensive instrumentation covers over 8000  
different instruments.  
You will find them in the Internet.  
Or request our catalog.*

**HEBU**  
medical



HEBU medical  
Badstrasse 8  
D-78532 Tuttlingen  
Germany  
Tel. +49 7461 9471 -0  
Fax +49 7461 9471 -22  
[www.HEBUmedical.de](http://www.HEBUmedical.de)  
[info@HEBUmedical.de](mailto:info@HEBUmedical.de)